

WINBACK
BACK3







Trattamenti in 15 minuti

BACK3^{TX} consente di completare i trattamenti in soli 15 minuti grazie alla multifrequenza. La combinazione di tre correnti in un'unica sessione di trattamento crea una soluzione rapida ed efficace per gestire le patologie più complesse.

La corrente TECAR genera un'azione biologica e diatermica in profondità, favorendo altresì la circolazione sanguigna e linfatica, il tutto riducendo il dolore e l'infiammazione.

La corrente Hi-TENS lenisce il dolore e favorisce il controllo della fase infiammatoria.

Infine, la corrente Hi-EMS viene utilizzata per il reclutamento dei muscoli profondi e favorire la mobilitazione, la vascolarizzazione e il drenaggio.

Facilità d'uso

BACK3^{TX} adatta automaticamente la potenza del dispositivo grazie alla funzionalità Power-In, oltre ad avere una funzione di riconoscimento automatico degli accessori con programmi preimpostati e un'interfaccia ergonomica. Dispositivo predisposto per l'AI, BACK3^{TX} è anche dotato di connessione Wi-Fi per aggiornamenti e funzionalità diagnostica da remoto.





Formato compatto


Il dispositivo eroga tre correnti grazie al sistema a multifrequenza (TECAR, Hi-TENS e Hi-EMS) con un unico manipolo in grado di gestire 11 elettrodi diversi e due bracciali RET, il tutto facile da trasportare con un peso di 4 kg.

Trattamenti ottimizzati


Trattate una zona del corpo con l'impugnatura TX, i pad fissi o i bracciali e una piastra di ritorno (fissa o mobile).

Scegliete la modalità che vi permette di ottenere i risultati terapeutici desiderati

- **CET:** azione locale sui tessuti molli

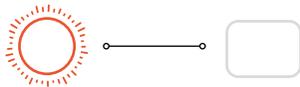

- **RET:** tessuti duri e/o in profondità

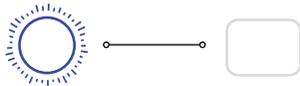

- **MIX:** tessuti fibrotici e cicatrici




Spingetevi oltre con la multifrequenza e migliorate l'efficacia




Hi-TENS + RET: effetto antalgico immediato e duraturo, oltre al sollievo dei trigger points.



Hi-EMS + RET: mobilizzazione dinamica dei muscoli profondi.

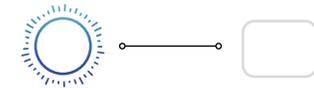

Hi-TENS + Hi EMS + RET: stimolazione bio-mio-neuro, riduzione del dolore, riduzione della tensione, più movimento.

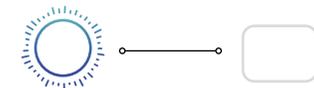







BACK³TX

Potenza
100 W

Processore
Dual core

Frequenze
TECAR: 300 kHz, 500 kHz, 1000 kHz
Hi-TENS: 2 Hz, 5 Hz, 25 Hz
Hi-EMS: 1500 Hz, 4000 Hz

Modalità
CET: deep, soft, dynamic
Hi-TENS: static, dynamic
Hi-EMS: radial, focal, dynamic
Intensità CET, RET e MIX: low, medium, boost
SWAP: alternanza tra RET e Hi-TENS

Norme
Produzione secondo la norma ISO13485
Marchio CE per dispositivi medici - MTIC 0068

- Contiene**
- 1 manipolo TX
 - 11 elettrodi:
 - 4 CET
 - 4 RET
 - 1 Hi-RET
 - 2 multipolari
 - 2 bracciali
 - 1 cavo splitter a Y
 - 2 pad fissi
 - 1 cavo TECAR mobile RET
 - 1 cavo TECAR mobile neutro
 - 1 cavo adesivo RET
 - 1 cavo adesivo neutro
 - 1 manipolo di ritorno
 - 1 piastra di ritorno
 - 1 carrello



Connessione
Wi-Fi



Funzionalità
Power-In



Multifrequenza



Predisposizione
per l'AI



Body Zone



Portatile

